

# MOONSTONE®


*Scheda Prodotto*



**MOONSTONE  
ad anello**



**MOONSTONE  
di contenimento**

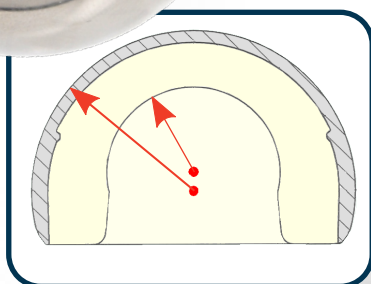

Coppa Bipolare ad Eccentricita' Positiva<sup>(1)</sup>



# Referenze

## Coppa Mobile ad Anello

Ø Interno	Ø Coppa	Cat. N°
Ø22.2	Ø39	H35 2239
	Ø40	H35 2240*
	Ø41	H35 2241
	Ø42	H35 2242*
	Ø43	H35 2243
	Ø44	H35 2244*
	Ø45	H35 2245
Ø28	Ø43	H35 2843
	Ø44	H35 2844*
	Ø45	H35 2845
	Ø46	H35 2846*
	Ø47	H35 2847
	Ø48	H35 2848*
	Ø49	H35 2849
	Ø50	H35 2850*
	Ø51	H35 2851
	Ø52	H35 2852*
	Ø53	H35 2853
	Ø54	H35 2854*
Ø55	H35 2855	
Ø56	H35 2856*	
Ø57	H35 2857	
Ø59	H35 2859*	


## Coppa Mobile di Contenimento

Ø Interno	Ø Coppa	Cat. N°
Ø28	Ø43	H35 R2843
	Ø45	H35 R2845
	Ø47	H35 R2847
	Ø49	H35 R2849
	Ø51	H35 R2851
	Ø53	H35 R2853
	Ø55	H35 R2855
	Ø57	H35 R2857
Ø59	H35 R2859	

## Strumentario

Sistema	Descrizione	Cat. N°
Commune	Misuratore di testa	H36 001
	Punta da impatto	H36 002
	Manico impattatore	H01 023
	Placca di calibro	H36 003
Ad Anello	Pinza ad anello	S01 006
Di Contenimento	Pressa per inserto	H52 033
	Pressa a vite	H52 030
	Punta spingi testa	H52 035
	Centralizzatore di testa	H52 031

\* Impianto disponibile solo su richiesta

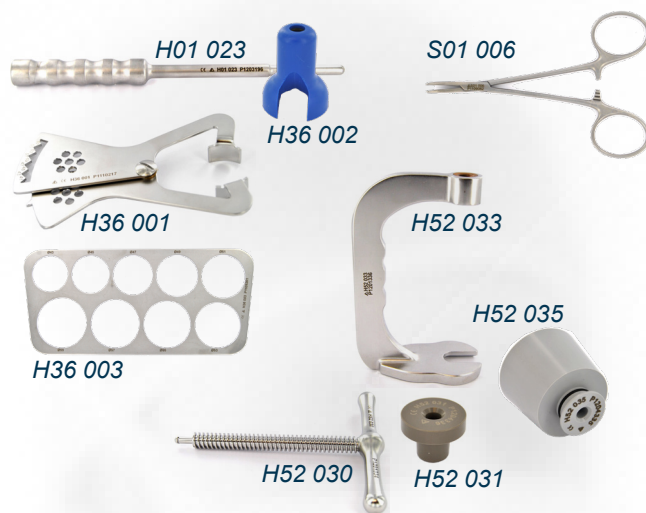

### (1) Eccentricità positiva:

Il centro di rotazione della testa del femore medializzata rispetto al centro di rotazione della coppa: nel momento della messa in carico i centri di rotazione si allineano sull'asse di JRF (joint resultant force-Pauwels) e la coppa si centra automaticamente rispetto al collo del femore.

### Nota legale:

Gli impianti MOONSTONE sono dei dispositivi medici impiantabili di III Classe indicati per le artroplastiche di prima intenzione intermedie (PIH) dell'anca.

Il chirurgo è espressamente invitato a leggere attentamente le istruzioni, menzionate sulle modalità d'uso S02 0313 incluse nella confezione del DISPOSITIVO MEDICO, così come nel manuale di tecnica operatoria consegnato con il prodotto o disponibile al download sul sito [www.evolutis-group.com](http://www.evolutis-group.com).

### Materiali:

Coppa: Acciaio inossidabile conforme ISO5832-1 (esterno) e UHMWPE conforme ISO 5834-1 e 2 (interno)

Confezione: Sterilizzato ai Raggi Gamma e confezionato sotto vuoto VacUpac



10 Place des Tuilliers, 42720 Briennon, France  
18 Avenue du Polygone, 42300 Roanne, France  
Tel : +33. (0)477.60.79.99 - Fax : +33. (0)477.60.79.90



**Evolutis Italia S.r.l.**  
Via Lirone 60/C, 40013 – Castel Maggiore, Bologna, Italia  
Tel : +39 051 284 0007  
[customerservice@evolutisitalia.it](mailto:customerservice@evolutisitalia.it)  
[evolutis-group.com/it](http://evolutis-group.com/it)